

Fermavisc®

SafeDrop® 0,1 %

(Natriumhyaluronat 0,10%)/(hyaluronate de sodium 0,10%)/(sodio ialuronato allo 0,10%)

D Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig – sie wird Ihnen helfen, die Augentropfen richtig anzuwenden.

Benetzende Augentropfen zur Befeuchtung und zum Schutz der Augenoberfläche mit Hyaluronsäure.

Zur langanhaltenden Linderung bei Trockenheitsgefühl und umgebungsbedingten Befindlichkeitsstörungen des Auges wie z.B. Brennen, Tränen und Sandkorngefühl.

Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel.

Wohlthuend, gut verträglich und langanhaltend.

Für harte und weiche Kontaktlinsen geeignet.

Was ist Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % ist ein steriles, phosphatfreies und mittelviskoses Benetzungsmittel im innovativen SafeDrop®-System, einem von OmniVision mitentwickelten, konservierungsmittelfreien Mehrdosenbehältnis. Mit Hilfe der praktischen breiten Fingerauflage kann es optimal angewendet werden.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % enthält Hyaluronsäure und dient der verbesserten und langanhaltenden Befeuchtung der Augenoberfläche. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschlichen Auges und im Tränenfilm vorkommt, und dadurch besonders gut verträglich ist. Sie zeichnet sich durch ein hohes Wasserbindungsvermögen aus, haftet gut auf der Augenoberfläche (mucoadhäsive Eigenschaften) und ist viskoelastisch. Somit befeuchtet, benetzt und schützt Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % die Oberfläche des Auges und sorgt für einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Feuchtigkeitfilm auf der Augenoberfläche.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % eignet sich sehr gut bei brennenden, tränenden Augen und Sandkorngefühl. Es bewirkt eine langanhaltende Linderung bei Trockenheitsgefühl und umgebungsbedingten Befindlichkeitsstörungen des Auges.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % ist zur Benetzung von Kontaktlinsen gut geeignet. Dadurch wird der Tragekomfort der Kontaktlinsen deutlich verbessert.

Zusammensetzung

Natriumhyaluronat (0,10%), Sorbitol, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Citronensäure, gereinigtes Wasser.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % kann bei folgenden Indikationen verwendet werden:

- bei trockenen Augen, die z.B. durch das Sjögren Syndrom oder durch die Einnahme von Arzneimitteln verursacht werden
- bei Umweltstress, z.B. durch Klimaanlagen, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch
- bei Müdigkeit und Sehschmerz durch intensives Sehen, z.B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder langen Autofahrten
- bei mechanischer Beanspruchung, z.B. durch das Tragen von harten oder weichen Kontaktlinsen oder durch diagnostische Eingriffe am Auge.

Wann sollte man Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % nicht anwenden?

- Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Für wen ist Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % geeignet?

- Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen.
- Schwangere, stillende Frauen und Kleinkinder sollten vor der Anwendung von Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % auftreten?

- Nach der Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe (Schleiersehen) eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschinen bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach dem Tropfen können vorübergehende Symptome, z.B. leichtes Brennen der Augen auftreten.

Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?

- Nicht verwenden bei beschädigtem SafeDrop® Mehrdosenbehältnis.
- Das Auge mit der Tropferspitze nicht berühren, um Infektionen oder Verletzungen des Auges zu vermeiden.
- Die Tropferspitze darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden.

F Lisez attentivement cette notice d'emballage. Elle vous aidera à utiliser le collyre correctement.

Collyre humidifiant contenant de l'acide hyaluronique, pour l'hydratation et la protection de la surface oculaire.

Pour le soulagement prolongé de la sensation de sécheresse et des symptômes oculaires dus à l'environnement comme p.ex. yeux qui brûlent, larmoient et sensation de corps étranger dans l'œil.

Collyre stérile sans phosphate et sans conservateur.

Bienfaisant et bien toléré, avec une efficacité prolongée.

Approprié pour les lentilles de contact rigides et souples.

Qu'est-ce que Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % est un collyre humidifiant stérile moyennement visqueux, sans conservateur et sans phosphate, présenté dans le système SafeDrop® innovant, un récipient multidose développé en collaboration avec OmniVision. Le large appui pour les doigts permet une manipulation optimale.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % contient de l'acide hyaluronique et permet une hydratation prolongée améliorée de la surface oculaire. L'acide hyaluronique étant une substance naturelle également présente chez l'homme dans certaines structures de l'œil et dans le film lacrymal, il est particulièrement bien toléré. Il se distingue par une grande capacité de rétention d'eau, adhère bien à la surface oculaire (propriétés muco-adhésives) et est viscoélastique. Ainsi, Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % hydrate, lubrifie et protège la surface oculaire et y crée un film humide stable et uniforme qui adhère particulièrement longtemps à la surface de l'œil.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % est très bien approprié pour les yeux qui brûlent, qui coulent ou qui grattent (sensation de corps étranger). Il apporte un soulagement prolongé de la sensation de sécheresse et de la gêne oculaire due à l'environnement.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % convient parfaitement à l'hydratation de lentilles de contact. Il permet ainsi d'améliorer sensiblement le confort de port des lentilles de contact.

- Nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion anwenden.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses wird auf jeder SafeDrop®-Flasche sowie auf der Faltschachtel angegeben.
- Ein einzelnes Mehrdosenbehältnis darf nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % ist nicht als Aufbewahrungsfüssigkeit von Kontaktlinsen geeignet.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Wenn Ihre Beschwerden während der Anwendung von Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % anhalten, suchen Sie bitte Ihren Augenarzt auf.

Wie wird Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % angewendet?

Nur für den äußerlichen Gebrauch.

Schritt 1:

Bitte dokumentieren Sie vor der ersten Anwendung das Anbruchsdatum in dem dafür vorgesehenen Feld auf dem Flaschenetikett. Vor jeder Anwendung die Schutzkappe abnehmen.

Schritt 2:

Bitte vor der ersten Anwendung der SafeDrop®-Flasche mehrere Druckbewegungen ausführen, bis der erste Tropfen produziert wird. Halten Sie dabei gemäß der Abbildung die Flasche kopfüber. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Tropferspitze mit den Fingern und dem Auge.

Schritt 3:

Halten Sie die Flasche, wie im Bild dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Daumen auf der breiten, abrutschsicheren, runden Fingerauflage ruht.

Schritt 4:

Legen Sie nun den Kopf etwas zurück (Nackenposition) und ziehen Sie das Unterlid mit der freien Hand leicht vom Auge ab. Träufeln Sie einen bis zwei Tropfen Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % in den Bindehautsack jeden Auges ein, indem Sie ein bis zweimal den Pumpmechanismus betätigen. Achten Sie darauf, dass dabei die Flasche senkrecht gehalten wird. Schließen Sie langsam die Augen, so dass sich Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilen kann.

Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie einen bis zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie diese in Ihre Augen einsetzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen getropft werden.

Nach Benutzung ist das Mehrdosenbehältnis mit der Schutzkappe zu verschließen.

Wie oft und wie lange sollte man Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % anwenden?

Wenden Sie Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % nach Bedarf oder nach Anweisung des Arztes an.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen. Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % sollte nach den anderen Produkten appliziert werden.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

Augentropfen in 10 ml SafeDrop® Mehrdosenbehältnissen.

Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?

Bei 5°C bis 25°C lagern.

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf der Flasche sowie auf der Faltschachtel.

Nach Anbruch der Flasche ist Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % sechs Monate verwendbar.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % kann im Hausmüll entsorgt werden.

Stand der Gebrauchsanweisung: März 2019

Composition

Hyaluronate de sodium (0,10%), sorbitol, chlorure de sodium, citrate de sodium, acide citrique et eau purifiée.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % peut être utilisé dans les indications suivantes:

- Sécheresse oculaire due p.ex. au syndrome de Sjögren ou à la prise de certains médicaments
- Lors de stress environnemental dû p.ex. à la climatisation, au vent, au froid, à la sécheresse ou à la pollution de l'air (fumée de tabac)
- Lors de fatigue et de stress oculaire dû p.ex. à une forte sollicitation des yeux devant un écran d'ordinateur, au microscope ou pendant de longs trajets en voiture
- Lors de contraintes mécaniques, p.ex. port de lentilles de contact rigides ou souples ou interventions de diagnostic oculaire.

Quand Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % ne doit-il pas être utilisé?

- Lors d'hypersensibilité à l'un des composants.

Pour qui Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % est-il approprié?

- Approprié pour une utilisation chez les adolescents et les adultes.
- Pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants en bas âge, le médecin traitant doit être consulté avant l'utilisation de Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %.

Quels effets secondaires Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % peut-il provoquer?

- L'acuité visuelle peut être réduite (comme à travers un voile) de façon passagère après l'application. Dans cette situation, il ne faut pas conduire et ne pas utiliser de machines. Il est conseillé d'attendre jusqu'à ce que l'acuité visuelle normale soit rétablie.
- Des symptômes passagers comme p.ex. une légère sensation de brûlure oculaire peuvent se manifester juste après l'application du collyre.

À quoi faut-il encore faire attention?

- Ne pas utiliser si le récipient multidose SafeDrop® est endommagé.
- Ne jamais toucher l'œil avec la pointe du compte-gouttes afin d'éviter des infections ou lésions oculaires.
- La pointe du compte-gouttes ne doit jamais entrer en contact avec d'autres objets ou avec des parties du corps.

- Ne pas utiliser pour le traitement d'une infection oculaire.
- Ne pas utiliser le collyre au-delà de la date de péremption. Celle-ci figure sur chaque flacon SafeDrop® ainsi que sur la boîte.
- Un même récipient multidose ne doit pas être utilisé par plusieurs patients.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % ne peut pas servir de solution de conservation pour lentilles de contact.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % doit être tenu hors de portée des enfants.
- Consultez un ophtalmologue si vos problèmes persistent durant le traitement par Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %.

Comment utiliser Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Destiné uniquement à un usage externe.

Étape 1:

Avant la première utilisation, noter la date d'ouverture du flacon dans le champ prévu à cet effet sur l'étiquette du flacon. Retirer le capuchon protecteur avant chaque application.

Étape 2:

Avant la première utilisation du flacon SafeDrop®, comprimer plusieurs fois le flacon tenu à l'envers jusqu'à l'apparition de la première goutte (voir l'illustration). Éviter tout contact de la pointe du compte-gouttes avec les doigts et l'œil.

Étape 3:

Tenir le flacon comme illustré, en veillant à ce que le pouce repose sur la zone d'appui large, ronde et antidérapante.

Étape 4:

Pencher la tête en arrière et à l'aide de la main libre, tirer une paupière inférieure vers le bas. Verser une ou deux gouttes de Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % dans le sac conjonctival de chaque œil en actionnant une à deux fois le mécanisme de pompage. Veiller à maintenir le flacon dans une position verticale. Fermer lentement les yeux afin de permettre une répartition uniforme des gouttes de Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % sur la surface oculaire.

Alternativement, si les gouttes sont utilisées avec des lentilles de contact, appliquer une à deux gouttes sur chaque lentille avant de l'insérer dans l'œil au lieu d'instiller les gouttes directement dans vos yeux.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % peut aussi être appliqué pendant le port de lentilles de contact.

Le capuchon protecteur du récipient multidose doit être remis en place après chaque utilisation.

Combien de fois et pour combien de temps peut-on utiliser Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Utilisez Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % selon le besoin ou conformément aux instructions de votre médecin.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % est approprié pour une utilisation à long terme, mais comme pour tous les problèmes de santé, vous devez consulter votre médecin si les symptômes persistent longtemps.

Espacer les applications des différents médicaments de 30 minutes environ en cas de traitement local supplémentaire. Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % doit être appliqué après les autres produits.

Présentations disponibles:

Collyre en flacons multidoses SafeDrop®: 1 x 10 ml.

Quelles règles doivent être respectées pour la conservation et l'élimination du produit?

Conservé entre 5°C et 25°C.

Protéger du gel et des rayons solaires directs.

Le numéro de lot et la date de péremption sont indiqués sur le flacon et la boîte.

Le flacon de Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % utilisé pendant six mois après ouverture.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % peut être jeté dans les ordures ménagères.

Mise à jour de la notice: mars 2019

I Leggere attentamente queste informazioni d'uso – serviranno per un uso corretto del collirio.

Collirio umettante con acido ialuronico per l'idratazione e la protezione della superficie oculare.

Per il sollievo duraturo dalla sensazione di secchezza e da fastidi oculari dovuti all'ambiente, come bruciore, lacrimazione, e sensazione di corpo estraneo nell'occhio.

Soluzione sterile senza fosfati e senza conservanti.

Lenitivo, ben tollerato e con azione prolungata.

Indicato per portatori di lenti a contatto dure e morbide.

Cos'è Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % è un collirio umettante sterile a viscosità media, senza fosfati e senza conservanti, che si avvale del sistema innovativo SafeDrop®, un contenitore multidose sviluppato in collaborazione con OmniVision. L'applicazione è ottimale grazie all'appoggio largo e pratico.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % contiene acido ialuronico e permette una idratazione della superficie oculare migliorata e a lunga durata. L'acido ialuronico è una sostanza che si trova naturalmente anche nelle strutture dell'occhio umano e nel film lacrimale, ed è quindi particolarmente ben tollerato. Si caratterizza per l'elevata capacità di legare l'acqua, aderisce bene alla superficie oculare (proprietà mucoadesive) ed è viscoelastico. Quindi Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % idrata, umetta e protegge la superficie oculare, e vi crea una pellicola umida uniforme, stabile e aderente alla superficie stessa a lunga durata.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % è particolarmente indicato nei casi di bruciore, lacrimazione e sensazione di corpo estraneo negli occhi. Apporta un sollievo duraturo dalla sensazione di secchezza e dai fastidi oculari dovuti all'ambiente.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % è indicato per l'idratazione delle lenti a contatto. Questo migliora significativamente il comfort nell'utilizzo delle lenti a contatto.

Composizione

Sodio ialuronato (0,10%), sorbitolo, sodio cloruro, sodio citrato, acido citrico, acqua purificata.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % può essere impiegato nelle seguenti indicazioni:

- secchezza oculare causata, ad esempio, dalla sindrome di Sjögren o dall'assunzione di alcuni farmaci
- Secchezza dovuta a stress ambientali, come aria condizionata, vento, freddo, secchezza o inquinamento dell'aria (come fumo di sigaretta)
- affaticamento o stress visivo, ad es. a causa dell'uso prolungato del computer o del microscopio o per lunghi viaggi in auto
- in caso di sollecitazione meccanica, ad es. a causa di lenti a contatto dure o morbide o per interventi diagnostici all'occhio.

Quando non si può usare Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

- In caso di ipersensibilità a uno dei componenti.

Per chi è indicato Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

- Indicato per l'uso negli adulti e negli adolescenti.
- Le donne in gravidanza e in allattamento devono consultare il proprio medico curante prima dell'utilizzo di Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %.

Quali effetti collaterali può avere Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

- Dopo l'applicazione, l'acuità visiva potrebbe diminuire temporaneamente (velatura agli occhi). In questo caso non guidare veicoli e non manovrare macchinari. Si consiglia di attendere finché la normale acuità visiva non è ripristinata.

- Sintomi momentanei, come una leggera sensazione di bruciore agli occhi, possono manifestarsi subito dopo l'applicazione del collirio.

Quali precauzioni e avvertenze si devono osservare?

- Non usare il prodotto se il contenitore multidose SafeDrop® è danneggiato.
- La punta dell'erogatore non deve entrare in contatto con la superficie dell'occhio, onde prevenire infezioni o lesioni dell'occhio.

- La punta dell'erogatore non deve entrare in contatto con altri oggetti o parti del corpo.
- Non impiegare come trattamento esclusivo di un'infezione oculare.
- Non utilizzare il collirio dopo la data di scadenza indicata su ciascun flaconcino SafeDrop® e sulla scatola.
- Un singolo contenitore multidose non deve essere usato da più pazienti.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % non è indicato come soluzione per la conservazione di lenti a contatto.
- Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini.
- Consultare il proprio oculista se i sintomi persistono durante l'uso di Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %.

Come si usa Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Solo per uso esterno.

Passo 1:

Prima di applicare il prodotto la prima volta, scrivere la data di apertura nell'apposito campo sull'etichetta del flaconcino. Prima di ciascuna utilizzazione rimuovere il cappuccio protettivo.

Passo 2:

Prima del primo utilizzo del flaconcino SafeDrop®, premere più volte sul flaconcino fino all'erogazione della prima goccia (come indicato nella figura). Tenere il flaconcino capovolto come indicato nella figura. Evitare che la punta dell'erogatore entri in contatto con la dita e l'occhio.

Passo 3:

Tenere il flaconcino come indicato nella figura. Il pollice deve poggiare sull'area ampia, rotonda e antiscivolo.

Passo 4:

Reclinare leggermente la testa all'indietro e con le dita della mano libera tirare la palpebra inferiore verso il basso. Applicare una o due gocce di Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % nella sacca congiuntivale di ciascun occhio premendo una o due volte il dispositivo di erogazione a pompa. Nell'eseguire questa operazione tenere il flaconcino in posizione verticale. Chiudere lentamente l'occhio per distribuire Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % uniformemente sulla superficie oculare.

In alternativa, se le gocce vengono utilizzate con le lenti a contatto, applicare una o due gocce di prodotto su ciascuna lente a contatto prima di indossarla, invece di applicare le gocce direttamente nell'occhio.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % può essere applicato anche mentre si portano le lenti a contatto.

Dopo l'uso chiudere il contenitore multidose con il cappuccio di protezione.

Con quale frequenza e per quanto tempo si può usare Fermavisc® SafeDrop® 0,1 %?

Applicare Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % secondo necessità o secondo le indicazioni del medico.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % è indicato per l'uso a lungo termine, tuttavia, come in tutte le patologie, consultare il proprio medico se i sintomi persistono. Se oltre a Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % si usa anche un altro trattamento locale, lasciare trascorrere ca. 30 minuti tra l'applicazione di un prodotto e l'altro. Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % deve essere applicato dopo gli altri prodotti.

Sono disponibili i seguenti formati:

Collirio in contenitori multidose SafeDrop®: 1 x 10 ml.

Quali avvertenze si devono osservare per la conservazione e lo smaltimento?

Conservare tra 5°C e 25°C.


Proteggere dal gelo e dall'esposizione diretta alla luce del sole.

Il numero di lotto e la data di scadenza sono riportati sul flaconcino e sulla scatola esterna.

Utilizzare Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % entro sei mesi dalla prima apertura del flaconcino.

Fermavisc® SafeDrop® 0,1 % può essere smaltito nei rifiuti domestici.

Data di revisione del testo: Marzo 2019

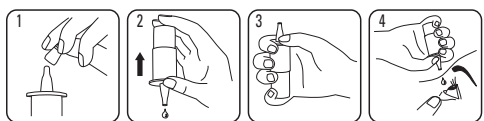

	Hersteller/Fabricant/Produttore
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren/Stérilisé à l'aide de procédés aseptiques/Sterilizzato con metodo asettico
	Gebrauchsanweisung beachten/Lire la notice d'emballage/Osservare le istruzioni per l'uso

	Vor Sonnenlicht schützen, vor Hitze schützen/Protéger des rayons solaires et de la chaleur/Proteggere dalla luce del sole e dal calore
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden/Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé/Non usare se la confezione è danneggiata
	Fertigungsnummer, Charge/Lot de production/Numero di lotto di produzione, lotto
	Verwendbar bis/Date limite d'utilisation/Scadenza
	Temperaturbegrenzung/Limites de température/Limiti di temperatura