

# Herba-Vision® Euphrasia

**MD sine**

(Natriumhyaluronat 0,15 %)/(hyaluronate de sodium 0,15 %)/(Ialuronato di sodio 0,15 %)

**D** Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig – sie wird Ihnen helfen, die Augentropfen richtig anzuwenden.

**Benetzende Augentropfen zur Befeuchtung der Augenoberfläche mit Hyaluronsäure & Augentrost.**

**Zur Linderung und Beruhigung bei gereizten, müden oder trockenen Augen, verursacht durch allgemeine Umwelteinflüsse, Computerarbeit oder das Tragen von Kontaktlinsen. Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel. Für harte und weiche Kontaktlinsen geeignet.**

**Was ist Herba-Vision® Euphrasia MD sine?**

Herba-Vision® Euphrasia MD sine ist ein steriles, phosphatfreies Benetzungsmittel im innovativen SafeDrop®-System, einem von OmniVision mitentwickelten, konservierungsmittelfreien Mehrdosenbehältnis. Mit Hilfe der praktischen breiten Fingerauflage kann es optimal angewendet werden.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine enthält Hyaluronsäure und Augentrosttinktur und dient der Benetzung und Befeuchtung der Augenoberfläche.

Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz, die auch in Strukturen des menschlichen Auges und im Tränenfilm vorkommt, und dadurch besonders gut verträglich ist. Sie zeichnet sich durch ein hohes Wasserbindungsvermögen aus, haftet gut auf der Augenoberfläche (mucoadhäsive Eigenschaften) und ist viskoelastisch. Extrakte aus Augentrost haben u. a. antioxidative und reizlindernde Eigenschaften: Sie werden bereits seit dem Mittelalter in der Volksmedizin zur Linderung von Beschwerden bei z. B. Bindehaut- und Lidrandreizungen, aber auch bei tränenden Augen, angewendet.

Somit befeuchtet, benetzt und schützt Herba-Vision® Euphrasia MD sine die Oberfläche des Auges.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine Augentropfen bringen Linderung und beruhigen bei gereizten oder trockenen Augen.

Die Augentropfen sind auch zur Benetzung von Kontaktlinsen gut geeignet. Dadurch wird der Tragekomfort der Kontaktlinsen deutlich verbessert.

**Zusammensetzung**

Natriumhyaluronat (0,15 %), Augentrosttinktur (0,05 %), Natriumchlorid, Natriumcitratdihydrat, Citronensäuremonohydrat, gereinigtes Wasser.

**Herba-Vision® Euphrasia MD sine kann bei folgenden Indikationen verwendet werden:**

- bei gereizten oder trockenen Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen
- bei Müdigkeit
- bei langandauernder Computerarbeit
- bei Aufenthalt in verräucherten Räumen
- bei Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

**Wann sollte man Herba-Vision® Euphrasia MD sine nicht anwenden?**

- Bei einer bestehenden Überempfindlichkeit (Allergie) gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

**Für wen ist Herba-Vision® Euphrasia MD sine geeignet?**

- Geeignet zur Anwendung bei Jugendlichen und Erwachsenen.
- Schwangere, stillende Frauen und Kleinkinder sollten vor der Anwendung von Herba-Vision® Euphrasia MD sine Ihren behandelnden Arzt konsultieren.

**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Herba-Vision® Euphrasia MD sine auftreten?**

- Nach der Anwendung kann vorübergehend eine Beeinträchtigung der Sehschärfe (Schleiersehen) eintreten. In diesem Fall sollte kein Fahrzeug gelenkt und keine Maschine bedient werden. Es empfiehlt sich zu warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Unmittelbar nach dem Tropfen können vorübergehende Symptome, z. B. leichtes Brennen der Augen auftreten.

**Welche Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind zu beachten?**

- Im Falle einer Beschädigung das Fläschchen nicht verwenden.
- Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob das Fläschchen unversehrt ist, um Sterilität des Inhalts zu gewährleisten.
- Um Kontamination zu vermeiden, Tropferspitze nicht berühren.
- Achten Sie darauf, das Auge nicht mit dem Tropfer zu berühren, um Verletzungen oder Augeninfektionen zu vermeiden.

- Die Tropferspitze des Mehrdosenbehältnisses darf nicht mit anderen Gegenständen oder Körperteilen berührt werden.
- Nach Gebrauch verschließen.
- Lösung nicht einnehmen.
- Nicht zur alleinigen Behandlung einer Augeninfektion anwenden.
- Dasselbe Mehrdosenbehältnis darf nicht von mehreren Patienten benutzt werden.
- Herba-Vision® Euphrasia MD sine ist nicht als Aufbewahrungsfähigkeit von Kontaktlinsen geeignet.
- Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.
- Herba-Vision® Euphrasia MD sine sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

**Wie wird Herba-Vision® Euphrasia MD sine angewendet?**

Nur für den äußerlichen Gebrauch.  
Hände vor Gebrauch waschen und abtrocknen.

**Schritt 1:**

Bitte dokumentieren Sie vor der ersten Anwendung das Anbruchsdatum in dem dafür vorgesehenen Feld auf dem Flaschenetikett. Vor jeder Anwendung die Schutzkappe abnehmen.

**Schritt 2:**

Bitte vor der ersten Anwendung der SafeDrop®-Flasche mehrere Druckbewegungen ausführen, bis der erste Tropfen produziert wird. Halten Sie dabei gemäß der Abbildung die Flasche kopfüber. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt der Tropferspitze mit den Fingern und dem Auge.

**Schritt 3:**

Halten Sie die Flasche, wie im Bild dargestellt. Achten Sie darauf, dass der Daumen auf der breiten, abrutschsicheren, runden Fingerauflage ruht.

**Schritt 4:**

Legen Sie nun den Kopf etwas zurück (Nackenposition) und ziehen Sie das Unterlid mit der freien Hand leicht vom Auge ab. Träufeln Sie einen bis zwei Tropfen Herba-Vision® Euphrasia MD sine in den Bindehautsack jeden Auges ein, indem Sie ein- bis zweimal den Pumpmechanismus betätigen. Achten Sie darauf, dass dabei die Flasche senkrecht gehalten wird. Schließen Sie langsam die Augen, so dass sich Herba-Vision® Euphrasia MD sine gleichmäßig auf der Augenoberfläche verteilen kann.

Alternativ, wenn die Tropfen in Verbindung mit Kontaktlinsen angewendet werden, bringen Sie einen bis zwei Tropfen auf jede Kontaktlinse auf, bevor Sie diese in Ihre Augen einsetzen, anstatt die Tropfen direkt in Ihre Augen zu geben.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen getropft werden.

Nach Benutzung ist das Mehrdosenbehältnis mit der Schutzkappe zu verschließen.

**Wie oft und wie lange sollte man Herba-Vision® Euphrasia MD sine anwenden?**

Wenden Sie Herba-Vision® Euphrasia MD sine nach Bedarf oder nach Anweisung des Arztes an.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Im Falle einer zusätzlichen lokalen Behandlung der Augen sollte zwischen den beiden Anwendungen ein zeitlicher Abstand von ca. 30 Minuten bestehen.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine sollte **nach** den anderen Produkten appliziert werden.

Bei Bedarf 1–2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

**Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:**

Augentropfen in 5 ml SafeDrop® Mehrdosenbehältnissen.

**Welche Hinweise zur Lagerung und Entsorgung sind zu beachten?**

Bei 5 °C bis 25 °C lagern.

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Angaben zur Lotnummer und zum Verfallsdatum finden Sie auf der Flasche sowie auf der Faltschachtel.

**Nach Anbruch der Flasche ist Herba-Vision® Euphrasia MD sine sechs Monate verwendbar.**

Herba-Vision® Euphrasia MD sine kann im Hausmüll entsorgt werden.

**Stand der Gebrauchsanweisung:** Juli 2019

**F** Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à utiliser correctement le collyre.

**Collyre hydratant contenant de l'acide hyaluronique et de l'euphrase, pour humidifier la surface oculaire.**

**Pour le soulagement et l'apaisement des yeux irrités, fatigués ou secs, en raison d'agressions environnementales générales, de travail sur ordinateur ou de port de lentilles de contact.**

**Solution stérile, sans phosphates, sans agents conservateurs. Convient pour l'utilisation avec des lentilles de contact souples et dures.**

**Qu'est-ce qu'Herba-Vision® Euphrasia MD sine?**

Herba-Vision® Euphrasia MD sine est un agent humidifiant sans phosphates, présenté dans le système innovant SafeDrop®, un récipient multidoses sans agents conservateurs codéveloppé par OmniVision. Il peut être appliqué de manière optimale grâce à la large surface d'appui pratique pour les doigts.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine contient de l'acide hyaluronique et une teinture mère d'euphrase, et sert à humider et hydrater la surface oculaire.

L'acide hyaluronique est une substance naturelle, qui est également présente dans les structures de l'œil humain et dans le film lacrymal, et qui est de ce fait particulièrement bien toléré. Il se caractérise par une capacité élevée de liaison à l'eau, adhère bien à la surface oculaire (propriétés muco-adhésives) et il est viscoélastique. Les extraits d'euphrase ont, entre autres, des propriétés antioxydantes et soulagent l'irritation: ils sont déjà utilisés en médecine populaire depuis le Moyen-âge pour soulager des troubles tels que les irritations de la conjonctive et du contour des yeux, mais aussi en cas d'yeux larmoyants.

Ainsi, Herba-Vision® Euphrasia MD sine humidifie, hydrate et protège la surface de l'œil.

L'utilisation du collyre Herba-Vision® Euphrasia MD sine permet de soulager et d'apaiser les yeux irrités ou secs.

Le collyre assure aussi une humidification des lentilles de contact, améliorant ainsi nettement leur confort de port.

**Composition**

Hyaluronate de sodium (0,15 %), teinture mère d'euphrase (0,05 %), chlorure de sodium, citrate de sodium dihydraté, acide citr que monohydraté, eau purifiée.

**Herba-Vision® Euphrasia MD sine peut être utilisé dans les indications suivantes:**

- En cas d'irritation ou de sécheresse oculaire, provoquée par le port de lentilles de contact
- En cas de fatigue
- En cas travail prolongé sur ordinateur
- En cas de séjour dans des lieux enfumés
- En cas d'agressions environnementales générales, telles que les particules de poussières, le pollen etc.

**Dans quels cas ne pas utiliser Herba-Vision® Euphrasia MD sine?**

- En cas d'hypersensibilité (allergie) à l'un des composants.

**A qui s'adresse Herba-Vision® Euphrasia MD sine?**

- Peut être utilisé chez les adolescents et les adultes.
- Les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que les enfants en bas âge, doivent consulter leur médecin traitant avant d'utiliser Herba-Vision® Euphrasia MD sine.

**Quels effets secondaires peuvent survenir lors de l'utilisation d'Herba-Vision® Euphrasia MD sine?**

- Une dégradation transitoire de l'acuité visuelle (vision voilée) peut se produire après l'application. Dans ce cas, il convient de ne pas conduire de véhicule ni d'utiliser de machine. Il est recommandé d'attendre que l'acuité visuelle se normalise.
- Des symptômes transitoires, tels qu'une légère brûlure oculaire, peuvent apparaître après l'instillation des gouttes.

**Quelles sont les mesures de précaution et mises en garde à respecter?**

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Vérifiez avant la première utilisation que le scellement du flacon est intact, afin de garantir la stérilité de son contenu.
- Pour éviter toute contamination, ne pas toucher l'embout compte-gouttes.
- Veillez à ce que l'embout n'entre pas en contact avec l'œil, pour éviter les blessures ou infections oculaires.
- L'embout compte-gouttes du récipient multidoses ne doit pas entrer en contact avec d'autres objets ou parties du corps.
- Refermer après utilisation.
- Ne pas ingérer la solution.
- Ne pas utiliser pour le traitement en monothérapie d'une infection oculaire.
- Le même récipient multidoses ne doit pas être utilisé par plusieurs patients.
- Herba-Vision® Euphrasia MD sine ne convient pas comme liquide de conservation des lentilles de contact.
- En cas de persistance ou d'aggravation des troubles, demander conseil à un ophtalmologue/spécialiste.
- Tenir Herba-Vision® Euphrasia MD sine hors de la portée et de la vue des enfants.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.

## Comment utiliser Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

Réservé uniquement à l'usage externe.

Se laver et se sécher les mains avant l'utilisation.

### Étape 1:

Avant la première utilisation, veuillez inscrire la date d'ouverture dans le cadre prévu à cette fin sur l'étiquette du flacon. Retirer le capuchon protecteur avant chaque utilisation.

### Étape 2:

Avant la première utilisation du flacon SafeDrop®, appuyer plusieurs fois sur le fond du flacon jusqu'à ce que la première goutte sorte. Tenez le flacon avec l'embout vers le bas, comme indiqué sur l'illustration. Veuillez éviter tout contact de l'embout avec les doigts et l'œil.

### Étape 3:

Tenez le flacon comme indiqué sur l'illustration. Veuillez à ce que le pouce soit placé sur la surface d'appui large, antidérapante et ronde.

### Étape 4:

Inclinez légèrement la tête en arrière (position de la nuque), et, de la main libre, éloignez délicatement la paupière inférieure de l'œil. Instillez une à deux gouttes d'Herba-Vision® Euphrasia MD sine dans le sac conjonctival de chaque œil, en actionnant une à deux fois le mécanisme de pompe. Veuillez à tenir le flacon verticalement. Fermez lentement les yeux, de sorte qu'Herba-Vision® Euphrasia MD sine puisse se répartir régulièrement à la surface de l'œil.

Par ailleurs, en cas de port de lentilles de contact, appliquez une à deux gouttes sur chaque lentille, avant de les mettre en place sur vos yeux, au lieu d'instiller directement les gouttes dans vos yeux.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine peut aussi être instillé pendant le port de lentilles de contact.

Après utilisation, refermer le récipient multidoses avec le capuchon protecteur.

## Quelles sont la posologie et la durée d'utilisation d'Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

Utilisez Herba-Vision® Euphrasia MD sine selon les besoins, ou selon les recommandations du médecin.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine convient pour une utilisation à long terme mais, comme pour toute affection, vous devez demander conseil à un ophtalmologue en cas de troubles persistants. En cas de traitement complémentaire local avec un autre collyre, un intervalle de 30 minutes environ doit être respecté entre les deux applications.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine devrait être instillé **après** les autres produits.

En cas de besoin, appliquer 1–2 gouttes dans le sac conjonctival de chaque œil et assurer leur répartition en clignant des yeux.

### Les emballages suivants sont disponibles:

Collyre en récipients multidoses SafeDrop® de 5 ml.

### Quelles sont les consignes de conservation et d'élimination à respecter?

Conserver entre 5°C et 25°C.


Protéger du gel et du rayonnement solaire direct.

Vous trouverez les indications concernant le numéro de lot et la date de péremption sur le flacon et sur l'étui cartonné.

### Herba-Vision® Euphrasia MD sine se conserve 6 mois après l'ouverture du flacon.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine peut être jeté avec les ordures ménagères.

**Dernière mise à jour:** juillet 2019

 Leggere attentamente queste informazioni - vi aiuteranno ad applicare correttamente il collirio.

### Collirio umettante per idratare la superficie dell'occhio, con acido ialuronico ed eufrasia.

**Per il sollievo e il rilassamento degli occhi irritati, stanchi o secchi, a causa di fattori ambientali generali, lavoro al computer o uso di lenti a contatto.**

**Soluzione sterile, senza fosfati, priva di conservanti.**

**Adatto per lenti a contatto rigide e morbide.**

### Che cos'è Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

Herba-Vision® Euphrasia MD sine è un agente umettante sterile e privo di fosfati incluso nell'innovativo sistema Safe-Drop®, un contenitore multidose privo di conservanti sviluppato in collaborazione con OmniVision. Grazie all'ampia e pratica flangia di appoggio per le dita può essere utilizzato in modo ottimale.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine contiene acido ialuronico e tintura di eufrasia e viene utilizzato per idratare e umettare la superficie dell'occhio.

L'acido ialuronico è una sostanza naturale presente anche nelle strutture dell'occhio umano e nel film lacrimale, ed è quindi particolarmente ben tollerato. È caratterizzato da un'elevata capacità di trattenere l'acqua, aderisce bene alla superficie dell'occhio (proprietà mucoadesive) ed è viscoelastico. Gli estratti di eufrasia includono proprietà anti-ossidanti e anti-irritanti: Sono stati impiegati nella medicina popolare dal Medioevo per alleviare sintomi come irritazione congiuntivale e palpebrale, ma anche in caso di lacrimazione eccessiva.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine quindi idrata, umetta e protegge la superficie dell'occhio.

Il collirio Herba-Vision® Euphrasia MD sine apporta sollievo e lenisce gli occhi irritati o secchi.

Il collirio è adatto anche per umettare le lenti a contatto, migliorandone significativamente il comfort di utilizzo.

### Composizione

Ialuronato di sodio (0,15%), tintura di eufrasia (0,05%), cloruro di sodio, citrato di sodio diidrato, acido citrico monoidrato, acqua purificata.

### Herba-Vision® Euphrasia MD sine può essere utilizzato per le seguenti indicazioni:

- occhi irritati o secchi a causa dell'uso di lenti a contatto
- stanchezza
- lavoro prolungato al computer
- permanenza in ambienti con fumo
- esposizione a fattori ambientali generali come particelle di polvere, pollini, ecc.

### Quando non si deve usare Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

- In caso di ipersensibilità (allergia) verso uno o più componenti.

### Per chi è adatto Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

- Adatto per l'uso in adolescenti e adulti.
- Per le donne in gravidanza o in allattamento, e per i bambini piccoli prima di utilizzare Herba-Vision® Euphrasia MD sine occorre consultare il medico curante.

### Quali effetti collaterali possono verificarsi quando si utilizza Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

- Dopo l'applicazione può verificarsi una temporanea compromissione dell'acuità visiva (visione appannata). In questo caso, non guidare veicoli e non azionare macchinari. Si consiglia di attendere il ripristino della normale acuità visiva.
- Subito dopo l'applicazione del collirio, possono manifestarsi sintomi temporanei, ad esempio lieve bruciore oculare.

### Quali precauzioni e avvertenze devono essere osservate?

- Non utilizzare il prodotto in caso di danni al flaconcino.
- Prima di aprire il flaconcino per la prima volta, verificare che sia intatto per garantire la sterilità del contenuto.
- Per evitare la contaminazione, non toccare la punta del contagocce.
- Fare attenzione che l'occhio non venga a contatto con il contagocce per evitare lesioni o infezioni agli occhi.
- Non toccare la punta del contagocce del contenitore multi-dose con altri oggetti o parti del corpo.

- Richiudere dopo l'uso.
- Non ingerire la soluzione.
- Non utilizzare come unico trattamento di un'infezione oculare.
- Lo stesso contenitore multidose non deve essere utilizzato da più pazienti.
- Herba-Vision® Euphrasia MD sine non è adatto come liquido di conservazione per lenti a contatto.
- Se i sintomi persistono o peggiorano, consultare un medico / specialista.
- Herba-Vision® Euphrasia MD sine deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza.

### Come si usa Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

Solo per uso esterno.

Lavare e asciugare le mani prima dell'uso.

### Passo 1:

Prima di procedere alla prima applicazione, annotare la data di apertura nell'apposito spazio sull'etichetta del flaconcino. Rimuovere il cappuccio protettivo prima di ogni utilizzo.

### Passo 2:

Prima di procedere alla prima applicazione premere Safe-Drop® più volte, fino all'emissione della prima goccia. Tenere il flaconcino inclinato come mostrato in figura. Evitare ogni contatto della punta del contagocce con le dita e l'occhio.

### Passo 3:

Tenere il flaconcino come mostrato in figura. Assicurarsi che il pollice poggi sull'ampia flangia di appoggio antiscivolo per le dita.

### Passo 4:

Inclinare lievemente la testa (posizione della nuca) all'indietro e abbassare leggermente la palpebra inferiore con la mano libera. Instillare una o due gocce di Herba-Vision® Euphrasia MD sine nel sacco congiuntivale di ciascun occhio azionando il meccanismo della pompa una o due volte. Assicurarsi che il flaconcino sia tenuto verticalmente. Chiudere lentamente gli occhi in modo che Herba-Vision® Euphrasia MD sine possa diffondersi uniformemente sulla superficie dell'occhio.

In alternativa, se si usa il collirio insieme alle lenti a contatto, applicare una o due gocce su ognuna di esse prima di inserirla, invece di applicare il collirio direttamente negli occhi.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine Plus può anche essere applicato mentre si indossano le lenti a contatto.

Dopo l'uso, il contenitore multidose deve essere richiuso con il cappuccio protettivo.

### Con quale frequenza e per quanto tempo si deve usare Herba-Vision® Euphrasia MD sine?

Utilizzare Herba-Vision® Euphrasia MD sine Plus in base alle necessità o secondo le indicazioni del proprio medico.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine è adatto per l'uso prolungato, ma analogamente a tutte le malattie, se i sintomi persistono è necessario consultare un oculista.

In caso di trattamento locale concomitante, si devono attendere circa 30 minuti tra le due applicazioni.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine Plus deve essere applicato **dopo** gli altri prodotti.

Se necessario, instillare 1–2 gocce nel sacco congiuntivale di ciascun occhio e diffonderle ammiccando.

### Sono disponibili le seguenti confezioni:

Collirio da 5 ml in contenitore multidose SafeDrop®.

### Quali istruzioni per la conservazione e lo smaltimento devono essere rispettate?

Conservare a temperature comprese fra +5°C e +25°C.


Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta.




Le informazioni sul numero di lotto e sulla data di scadenza si trovano sul flaconcino e sulla confezione pieghevole.



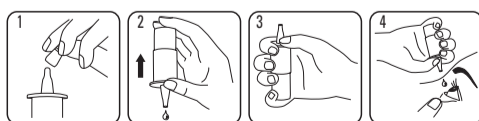


### Herba-Vision® Euphrasia MD sine Plus può essere utilizzato fino a sei mesi dall'apertura del flaconcino.

Herba-Vision® Euphrasia MD sine Plus può essere smaltito con i rifiuti domestici.

**Aggiornamento Istruzioni per l'uso:** luglio 2019



	Hersteller / Fabricant / Produttore
	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren / Stérilisé à l'aide de procédés aseptiques / Sterilizzato con metodo asettico
	Gebrauchsanweisung beachten / Lire la notice d'emballage / Osservare le istruzioni per l'uso

	Vor Sonnenlicht schützen, vor Hitze schützen / Protéger des rayons solaires et de la chaleur / Proteggere dalla luce del sole e dal calore
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Non usare se la confezione è danneggiata
	Fertigungslosnummer, Charge / Lot de production / Numero di lotto di produzione, lotto
	Verwendbar bis / Date limite d'utilisation / Scadenza
	Temperaturbegrenzung / Limites de température / Limiti di temperatura